

Relatório de Proteção Radiológica

Controle de Qualidade Equipamentos de Proteção Individual - EPIs


Instituição: Grupo Fleury - Unidade Campinas

Endereço: Av. Aquidaban, 747

Cidade: Campinas - SP

Data de execução: 29/03/2018

Validade de um (01) ano

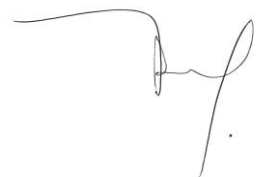

Renato Dimenstein
Físico em Medicina
CNEN-0004



Objetivo

Verificar a integridade de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) de acordo com as normas de proteção radiológica (Portaria/MS/SVS nº. 453, de 01 de junho de 1998 – 4.45:b:x).

Materiais e Métodos

Para a avaliação da integridade dos EPIs, foi utilizado:

Equipamento:	Raios-X
Marca:	Philips
Modelo:	Bucky Diagnost Optimus 50
Número de Série:	955522 (XRAY-0011)

Localização do equipamento:	Na unidade
------------------------------------	------------

Modo de avaliação:	Grafia, com uma distância foco filme de 100 cm, sem grade anti-difusora
---------------------------	---

Os EPIs testados estão distribuídos conforme a tabela abaixo:

Setor Acessório	Raios-X	Mamografia
Avental Pb	4	0
Prot. Tireóide	1	1
Prot. Gônadas	4	0



Cr terios de Avalia  o

S - Satisfat rio

S.N.I. - Substitui  o N o Imediata

S.I. - Substitui  o Imediata

Costurar - Necess rio reparo no equipamento de prote   o

- a) As imagens que apresentam marcas de alta densidade (escuras) indicam perda de integridade.
- b) Rachaduras com mais de 1,0 cm de tamanho recomenda-se imediata substitui  o do EPI.
- c) Rachaduras com menos de 1,0 cm de tamanho recomenda-se substitui  o do EPI em um per odo m ximo de seis meses.
- d) Caso o resultado da avalia  o seja "**Costurar**", o chumbo encontra-se  ntegro, entretanto o tecido ou costuras est o danificados. Recomenda-se que o mesmo seja retirado imediatamente de uso e consertado. Caso n o seja poss vel/vi vel o conserto, retirar de uso.

Avaliação dos EPIs

Tipo	Tamanho	Identificação	Setor	Avaliação
Avental Pb	Adulto	AVEN-0124	Raios-X	S
Avental Pb	Adulto	AVEN-0125	Raios-X	S
Avental Pb	Adulto	AVEN-0126	Raios-X	S
Avental Pb	Adulto	AVEN-0417	Raios-X	S
Prot. Tireóide	Adulto	TIRE-0420	Raios-X	S
Prot. Gônadas	Adulto	GONO-0094	Raios-X	S
Prot. Gônadas	Adulto	GONO-0095	Raios-X	S
Prot. Gônadas	Adulto	GONO-0468	Raios-X	S
Prot. Gônadas	Adulto	GONO-0469	Raios-X	S
Prot. Tireóide	Adulto	TIRE-0147	Mamografia	S

Conclusões da Avaliação

Todos os equipamentos de proteção individual encontram-se íntegros e de acordo com as normas da ANVISA.


Sugestões

Sugerimos que os equipamentos de proteção individual sejam armazenados estendidos horizontalmente ou em suporte apropriado, evitando-se danos à integridade. Para casos de transporte, recomendamos que os EPIs sejam enrolados, e não dobrados, com a finalidade de evitar rachaduras. É indicado também rotinas de limpeza periódica no tecido do EPIs.

Sugerimos que sejam verificados os suportes destinados ao armazenamento dos aventais a fim de estabelecer se os suportes são adequados ao número existente de aventais.

Estas sugestões têm como finalidade prolongar a vida útil dos mesmos.

São Paulo, 29 março, 2018

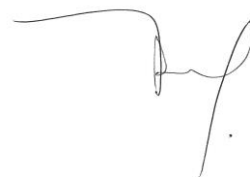

Renato Dimenstein
Físico em Medicina
CNEN-0004