

Relatório de Proteção Radiológica

Controle de Qualidade Equipamentos de Proteção Individual - EPIs


Instituição: Grupo Fleury - Unidade a+ Braz Leme

Endereço: Av. Braz Leme, 1802

Cidade: São Paulo - SP

Data de execução: 26/04/2018

Validade de um (01) ano

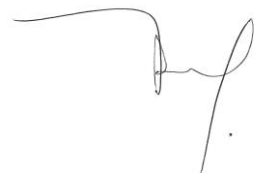

Renato Dimenstein
Físico Responsável



Objetivo

Verificar a integridade de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) de acordo com as normas de proteção radiológica (Portaria/MS/SVS nº. 453, de 01 de junho de 1998 – 4.45:b:x).

Materiais e Métodos

Para a avaliação da integridade dos EPIs, foi utilizado:

Equipamento:	Raios X
Marca:	Philips
Modelo:	Compact Plus 800
Número de Série:	PACF8701001 (XRAY-0118)

Localização do equipamento:	Av. Braz Leme, 2011
------------------------------------	---------------------

Modo de avaliação:	Grafia, com uma distância foco filme de 100 cm, sem grade anti-difusora
---------------------------	---

Os EPIs testados estão distribuídos conforme a tabela abaixo:

Setor Acessório	Mamografia
Avental Pb	1
Prot. Tireóide	2
Prot. Gônadas	1



Cr terios de Avalia  o

S - Satisfat rio

S.N.I. - Substitui  o N o Imediata

S.I. - Substitui  o Imediata

Reparo - Necess rio reparo no equipamento de prote   o

- a) As imagens que apresentam marcas de alta densidade (escuras) indicam perda de integridade.
- b) Rachaduras com mais de 1,0 cm de tamanho recomenda-se imediata substitui  o do EPI.
- c) Rachaduras com menos de 1,0 cm de tamanho recomenda-se reavalia  o do EPI em um per odo m ximo de 1 ano.
- d) Caso o resultado da avalia  o seja "**Reparo**", o chumbo encontra-se  ntegro, entretanto o tecido ou costuras est o danificados. Recomenda-se que o mesmo seja retirado imediatamente de uso e consertado. Caso n o seja poss vel/vi vel o conserto, retirar de uso.

Avaliação dos EPIs

Tipo	Tamanho	Cor	Identificação	Setor	Avaliação
Avental Pb	Adulto	Azul	AVEN-0263	Mamografia	S
Prot. Tireóide	Adulto	Azul	TIRE-0028	Mamografia	S.N.I.
Prot. Tireóide	Adulto	Azul	TIRE-0464	Mamografia	S
Prot. Gônadas	Adulto	Azul	GONO-0477	Mamografia	S

Conclusões da Avaliação

Recomenda-se que, para a listagem abaixo:

- a) sejam retirados de uso os EPIs com avaliação "**S.I.**".
- b) sejam reavaliados em um período máximo de um (01) ano os EPIs com avaliação "**S.N.I.**".
- c) sejam retirados temporariamente de uso os EPIs com avaliação "**Reparo**", e providenciado o conserto/costura. Caso não seja possível/viável, os mesmos devem ser substituídos.

Todos os outros equipamentos de proteção individual encontram-se íntegros e de acordo com as normas da ANVISA.

Tipo	Tamanho	Cor	Identificação	Setor	Avaliação
Prot. Tireóide	Adulto	Azul	TIRE-0028	Mamografia	S.N.I.



Sugestões

- * Sugerimos que os equipamentos de proteção individual sejam armazenados estendidos horizontalmente ou em suporte apropriado, evitando-se danos à integridade.
- * Para casos de transporte, recomendamos que os EPIs sejam enrolados, e não dobrados, com a finalidade de evitar rachaduras.
- * É indicado também rotinas de limpeza periódica no tecido do EPIs.
- * Sugerimos que sejam verificados os suportes destinados ao armazenamento dos aventais a fim de estabelecer se os suportes são adequados ao número existente de aventais.

Estas sugestões têm como finalidade prolongar a vida útil dos mesmos.

São Paulo, 27 abril, 2018

Renato Dimenstein
Físico Responsável