

CERTIFICADO:

003F

CERTIFICADO DE QUALIDADE

EQUIPAMENTO:

Densitometria Óssea

MARCA:

General Electric

MODELO:

Lunar Prodigy Advance

Nº DE SÉRIE:

41293 (DENO-0018)

INSTITUIÇÃO:

Grupo Fleury - Unidade a+ Lapa

ENDEREÇO:

Rua Barão de Jundiaí, 284

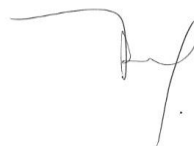
AFERIDO EM:

08/03/2018

VÁLIDO ATÉ:

08/03/2019

Certificamos que este equipamento apresenta performance de acordo com as normas da Portaria MS 453/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária de 01/06/1998 e RE nº 64 de 04/04/2003

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes.

RAD DIMENSTEIN
CONTROLE DE QUALIDADE EM RADIODIAGNÓSTICO



CONTROLE DE QUALIDADE DA IMAGEM

Instituição: Grupo Fleury - Unidade a+ Lapa

Endereço: Rua Barão de Jundiaí, 284

Cidade: São Paulo - SP

Equipamento: Densitometria Óssea

Data de execução: 08/03/2018

Marca: General Electric

Modelo: Lunar Prodigy Advance

Número de Série: 41293 (DENO-0018)

Ordem de serviço: 003F

Este relatório contém 4 páginas.



EQUIPAMENTO DE RAIOS-X

EQUIPAMENTO DE DENSITOMETRIA ÓSSEA

Inspeção Visual de Segurança

→ MECÂNICA:

BRAÇO DE SUSTENTAÇÃO

Estabilidade:

Boa

Movimentos:

Altura fixa

Movimento transversal:

Bom

Movimento longitudinal:

Bom

TIPO DE FEIXE:

Fan (Leque)

Indicação da posição central do feixe:

(x) linha da mesa

() nenhuma

Distância do feixe à posição do técnico na mesa de comando:

> 1 metro

MESA

Estabilidade:

Boa

Movimentos:

Bons

→ ELÉTRICA:

Porção visual dos cabos:

Bom

Indicação de Raios X em funcionamento:

Boa

Luzes de Indicação de Raios X em bom funcionamento:

Sim

Indicação de luz do shutter:

Possui

Indicação de luz de força:

Possui

Campo luminoso para indicação de posição do detector:

Laser (Bom)

Situações de indicação por campo luminoso da posição do detector:

Todas as situações que forem necessárias
--

→ FANTOMAS:

Número de fantasmas:

2

Tipos de fantoma:

Coluna (Spine Phantom) / Controle de Qualidade diário

→ CONTROLES:

Controles:

(x) Digital () Analógico

kVp (máx):

76 kV

I (máx):

3 mA

t (máx):

3 min.



a) Teste de Controle de Qualidade do Exame – *Lumbar Spine Phantom*

Procedimento: O Fantoma de coluna é posicionado na mesa de exames. O laser é posicionado na direção do fantoma para a realização deste teste. Os resultados são impressos na página de resultados para conferência dos valores de calibração pré - estabelecidos pelo fabricante.

Periodicidade do teste: mensal

Parâmetro de análise estabelecido pelo Fabricante: o parâmetro *Lumbar Spine BMD (gms/cm²)*, sendo verificado através da análise da curva. Os pontos obtidos devem estar dentro dos valores delimitados pela linha pontilhada da curva de *Lumbar Spine BMD (gms/cm²)*, apresentada no **Anexo 1**.

Resultados obtidos com o Fantoma:

Tipo: *Lumbar Spine Phantom*

1) Resultados Anexo 1

No Anexo 1 são apresentados: a curva de Lumbar Spine e os valores obtidos, que encontram-se descritos nas tabelas a seguir.

Condições do teste:

kVp = 76

mA = 0,75

Tempo de teste = 2 min.

Região:

L1-L4

Resultados Phantom:

	Phantom Spine	Resultado
BMD (g/cm ²)	1,171	Passou
T-score	-0,1	Passou
Z-score	0,9	Passou

Teste Anterior 2017	
BMD (g/cm ²)	1,187
Diferença (%)	1,366
Passou	

	Phantom QA	Resultado
BMD (g/cm ²)	1,003	Passou
BMD CV (%)	0,92	--

Obs: Entendemos que o sistema não permite a realização de exames se o teste não for aprovado.



CONCLUSÕES

Avaliação do equipamento de Raios X

Equipamento de Densitometria Óssea

a) Teste de Controle de Qualidade de Exame - Spine Phantom:

Adequado

Observações

Para que o programa de controle de qualidade esteja completo sugerimos:

- 1) que o(a) técnico(a) que realiza este controle deve ser instruído de como analisar o resultado;*
- 2) que seja designado um responsável pelo programa de controle de qualidade;*
- 3) que todos os exames sejam registrados e os exames rejeitados analisados e documentados para posterior análises;*
- 4) que a periodicidade dos testes seja estabelecida pela instituição.*

São Paulo, 28 março, 2018